

GÉZATONE

ISEE 410 3D RELAX



ISEE410

3D RELAX

ПРОГРАММА КРАСОТЫ

GÉZATONE

ISEE 410 3D RELAX

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР МАССАЖЕРА**



**ОЧИСТИТЕ ГЛАЗА ОТ
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ,
СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ**

**НАДЕНЬТЕ ОЧКИ – МАССАЖЕР И
ЗАФИКСИРУЙТЕ ПРИ ПОМОЩИ
РЕМНЯ.**



ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НАЖМИТЕ И
УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ВКЛ/ ВЫКЛ.
ПРИБОР ВКЛЮЧИТСЯ И ЗАРАБОТАЕТ
В ПЕРВОМ РЕЖИМЕ: 3D ВИБРО-
МАССАЖ, ПРОГРЕВ, МУЗЫКА



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ КНОПКОЙ ВКЛ/
ВЫКЛ : RELAXATION MODE, EYE
BEAUTY MODE, SLEEP MODE,
COMPREHENSIVE MODE И HEATING
MODE.



ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ МАССАЖЕР
ВЫКЛЮЧИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ



**ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПАТЧИ, ЗАТЕМ НАНЕСТИ КРЕМ**

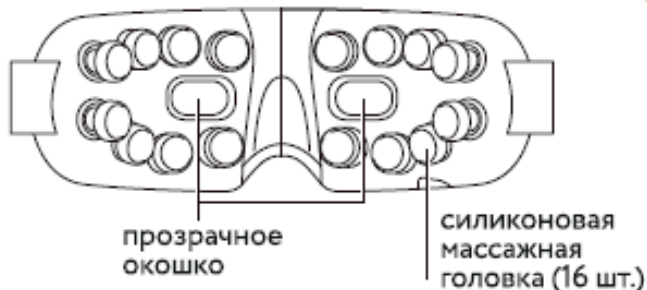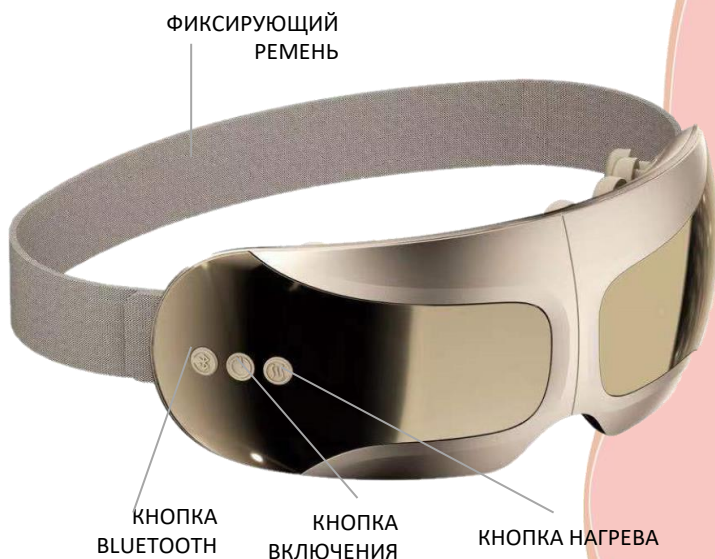

ISEE410

3D RELAX

GÉZATONE

ISEE 410 3D RELAX

**ОЧИЩЕНИЕ
И ДЕМАКИЯЖ**

ШАГ № 1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИСТИТЬ КОЖУ КОНТУРА
ГЛАЗ ОТ МАКИЯЖА.

НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

**УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
«АКВА 24»**



4515701K – 200 мл

КУПИТЬ



ОЧИСТИТЕ КОЖУ КОНТУРА ГЛАЗ ИСПОЛЬЗУЯ
УВЛАЖНЯЮЩУЮ ПЕНКУ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕДСТВА
НА ВАТНЫЙ ДИСК
ОЧИСТИТЕ КОЖУ КОНТУРА ГЛАЗ ПРИ ПОМОЩИ
ВАТНОГО ДИСКА,, УДАЛЯЯ МАКИЯЖ

ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА СМОЙТЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ.

GÉZATONE

ISEE 410 3D RELAX

МАССАЖ

ШАГ № 2

НАДЕНЬТЕ ОЧКИ – МАССАЖЕР И
ЗАФИКСИРУЙТЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕМНЯ.
НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ЗАПУСКА ПРИБОРА. ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ.



ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 15 МИНУТ



МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ,
ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПО УМОЛЧАНИЮ.

МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ
BLUETOOTH ДЛЯ СВЯЗИ С
МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ
КОМПЬЮТЕРОМ.

УСТАНОВИВ СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH, МОЖНО СЛУШАТЬ
ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ.



ISEE410

3D RELAX

GÉZATONE

ISEE 410 3D RELAX

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ № 3

ПЕПТИДНЫЕ ПАТЧИ ПРОТИВ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
С ЭФФЕКТОМ «БОТОКСА»

ПОСЛЕ МАССАЖА КОЖА ХОРОШО РЕАГИРУЕТ
НА КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД И ПРЕПАРАТЫ
ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО.



4515952K – 60 штук

КУПИТЬ



АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ БАНОЧКИ ПАРУ
ПАТЧЕЙ, ПОМЕСТИТЕ ПОД ГЛАЗА / ИЛИ НАД
ГЛАЗАМИ.

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ ПАТЧИ, ЛЕГКО
ПОМАССИРУЙТЕ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.



ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСИТЕ КРЕМ НА КОНТУР
ГЛАЗ, НЕ НАНОСИТЕ НА
ПОДВИЖНОЕ ВЕКО.

4515971K – 50 мл

КУПИТЬ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ "МАТРИКСИЛ"



GÉZATONE



ISEE410

3D RELAX

ДНЕМ И НОЧЬЮ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ "МАТРИКСИЛ"



4515971K – 50 мл

КУПИТЬ

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ОТ ОТЕКОВ И МОРЩИН



4515953K – 5 штук

КУПИТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД



ЗОЛОТЫЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПРОТИВ МОРЩИН
«МАТРИКСИЛ»

4515990K
– 60 ШТУК

КУПИТЬ



ГИАЛУРОНОВЫЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
ДЛЯ ГЛАЗ ПРОТИВ
ОТЕКОВ
«АКВА 24»

4515991K
– 60 ШТУК

КУПИТЬ

GÉZATONE



ISEE410

3D RELAX