


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

МАССАЖЕРОМ АМГ150



GÉZATONE

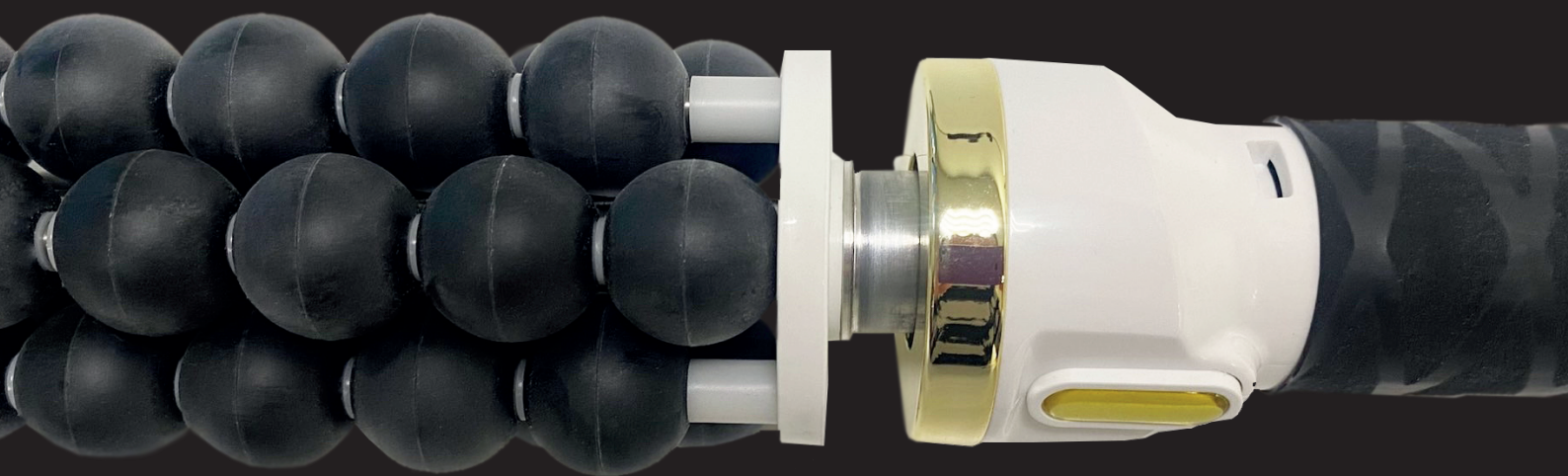

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ





соберите прибор, нажав на фиксаторы на рукоятках прибора и вставив их с торцов прибора



перед началом использования подключите сетевой адаптер



подключите разъем адаптера в гнездо питания на рукоятке прибора, адаптер подключите к сети 220В

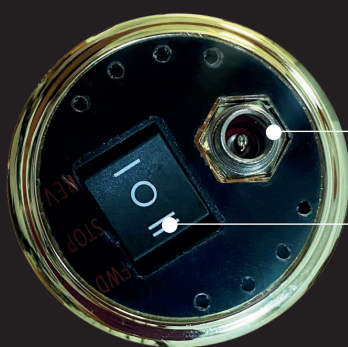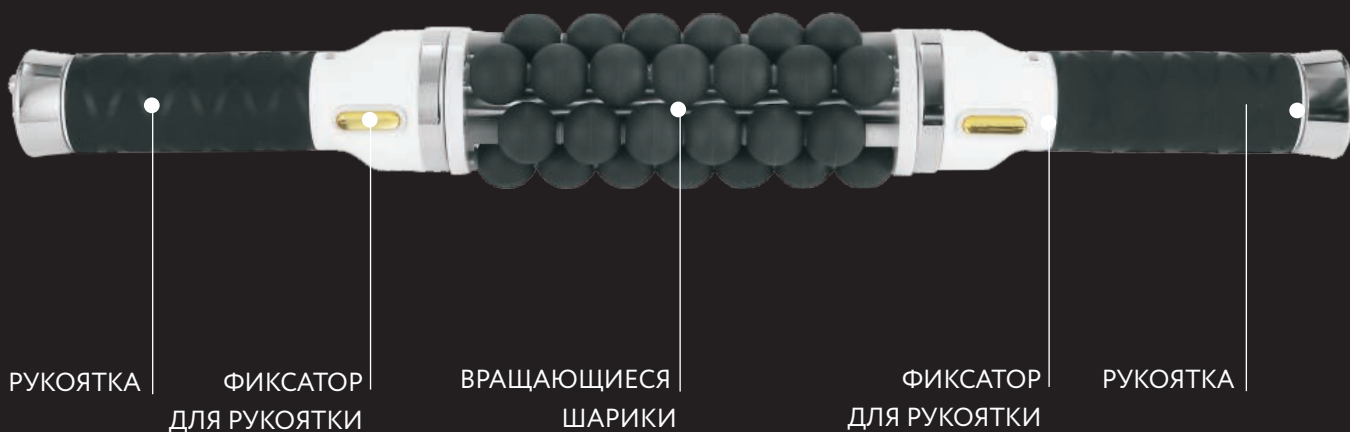

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ/
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ



АДАПТЕР ПИТАНИЯ
С РЕГУЛИРОВКОЙ
СКОРОСТИ

(вращайте регулятор по часовой стрелке для увеличения скорости, против часовой стрелки для уменьшения скорости и выключения прибора)

2 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Антицеллюлитный массаж помогает уменьшить объемы, избавиться от эффекта апельсиновой корки, подтянуть и укрепить кожу тела. Стимулирует лимфодренажный эффект



перед использованием аппарата необходимо очистить кожу

нанесите на кожу имбирное масло, перемещайте массажер по поверхности тела плавными движениями

Масло имбирное с разогревающим эффектом «ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ», Beauty Style, 4501902K




ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
МАССАЖА
НЕ ДОЛЖНО
ПРЕВЫШАТЬ
30 МИНУТ

проведите массаж одной или нескольких зон
(живот, бока, ягодицы, бедра, икры, спина,
внешняя и внутренняя поверхность рук)
по направлению снизу вверх
по линиям лимфодренажа или массажным линиям

СХЕМА ДВИЖЕНИЙ

при проведении процедур следуйте схеме направления движений

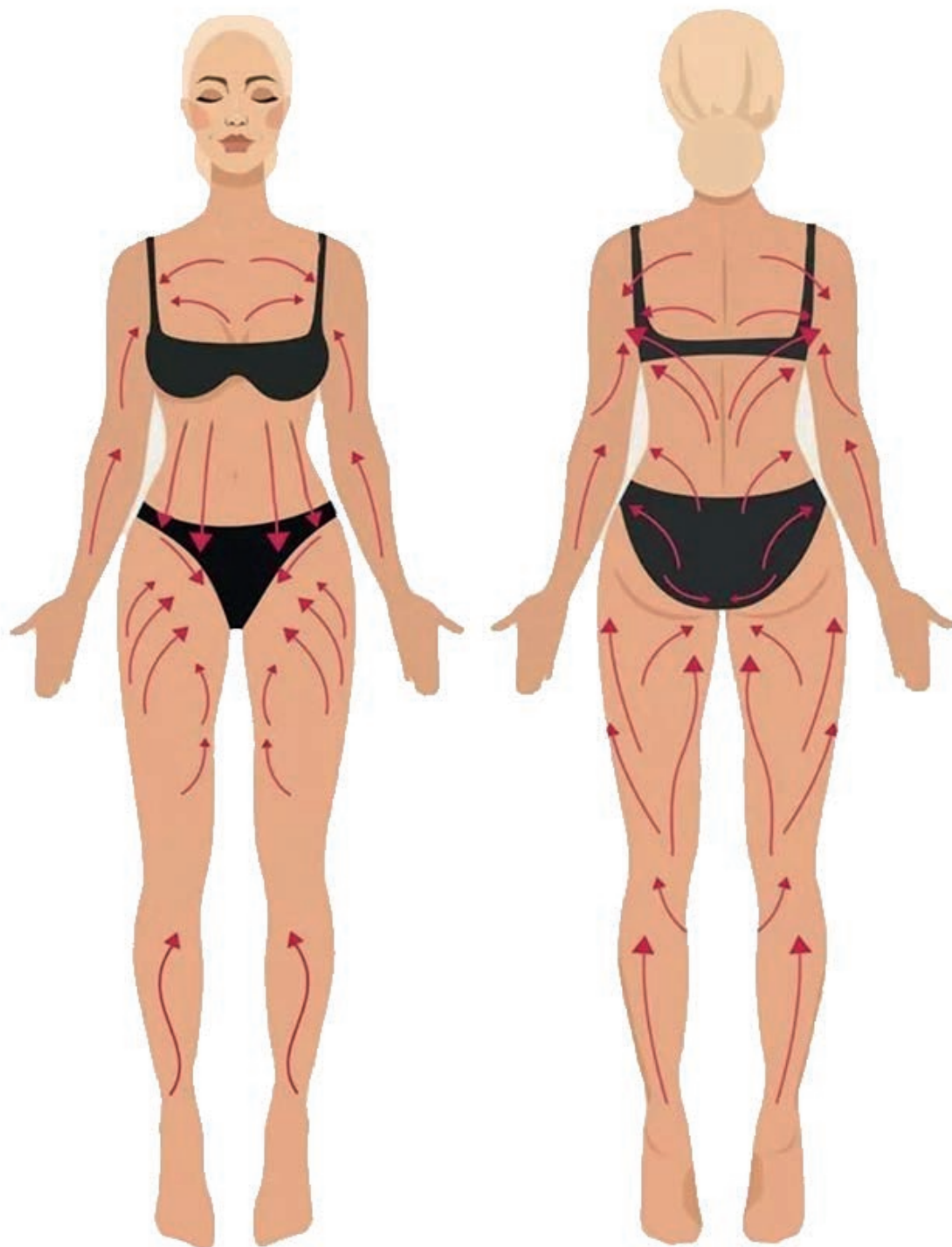

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МАССАЖА
НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ
30 МИНУТ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

при проведении процедур следуйте схеме направления движений



Токопроводящий
активный гель
«Боди Лифт Актив»,
Beauty Style,
4501430AR

Удалите остатки массажного масла
или крема салфеткой.
Нанесите на зоны обработки
«Боди Лифт Актив»



Чтобы процедуры с аппаратом проходили комфортно и приносили пользу, ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ КОСМЕТИКУ



Хотите узнать больше о возможностях вашего аппарата и его функциях? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОГРАММОЙ КРАСОТЫ, РАЗРАБОТАННОЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС



Наведите камеру на QR код и Вы получите видеоинструкцию и персональную программу красоты для Вашей кожи от косметологов Gezatone

