

GÉZATONE

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР
ДАРСОНВАЛЬ



BIOLIFT4 118

ПРОГРАММА КРАСОТЫ

GÉZATONE

BIO LIFT 4 118

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ



СНИМИТЕ ВСЕ УКРАШЕНИЯ
ОЧИСТИТЕ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
СМОЙТЕ ОСТАТКИ ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА. ПРОТИРИТЕ
ЛИЦО ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ.

**ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА, КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХАЯ.**



ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕКТРОД И УСТАНОВИТЕ ЕГО В ДЕРЖАТЕЛЬ
ДО УПОРА. ЭЛЕКТРОД ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ С
ЛЕГКИМ УСИЛИЕМ.



ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ПОВОРОТОМ РУЧКИ РЕГУЛЯТОРА ИНТЕНСИВНОСТИ
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
ОСТОРОЖНО ПОДНЕСИТЕ КОНЕЦ ЭЛЕКТРОДА К ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ.



УСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМУЮ СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЦЕДУРУ НАЧИНАЮТ С НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, ПОСТЕПЕННО
УВЕЛИЧИВАЯ ЕЕ ДО НЕОБХОДИМОГО ЗНАЧЕНИЯ.



ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ЛИЦЕ, ТЕЛЕИЛИ ГОЛОВЕ ПО ВЫБРАННОЙ
МЕТОДИКЕ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕЖИМЕ «ТИХОГО РАЗРЯДА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ БЕЗ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОДА И КОЖЕЙ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕЖИМЕ «ИСКРОВОГО РАЗРЯДА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ В 1-3 ММ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ЭЛЕКТРОДА И КОЖЕЙ.



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОТРИТЕ ЛИЦО ЛОСЬОНОМ, НАНЕСИТЕ НА ЛИЦО
МАСКУ, ЗАТЕМ НАНЕСИТЕ КРЕМ / СЫВОРОТКУ.



**НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТ БЕЗ
ЭЛЕКТРОДА!
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭЛЕКТРОДА
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ
ПРИБОР**



GÉZATONE

BIO LIFT 4 118

ШАГ № 1


ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА
НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА
И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ
СКРАБЫ, СРЕДСТВА С ВНА И АНА КИСЛОТАМИ,
ЭНЗИМНЫЕ ПИЛИНГИ И СРЕДСТВА,
СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТ.



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

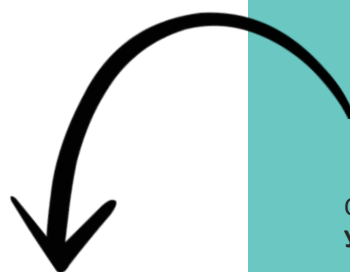

4515701K – 200 мл

КУПИТЬ




ОЧИСТИТЕ КОЖУ ИСПОЛЬЗУЯ
УВЛАЖНЯЮЩУЮ ПЕНКУ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НА КОЖУ
ЛИЦА И ШЕИ
ОЧИСТИТЕ КОЖУ,, УДАЛЯЯ МАКИЯЖ И
ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА СМОЙТЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ.



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

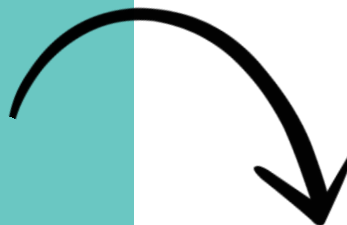

4515702K – 200 мл

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С
УВЛАЖНЯЮЩИМ ТОНИКОМ «АКВА 24»

НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА
НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

КУПИТЬ



GÉZATONE

BIO LIFT 4 118

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ШАГ № 2

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ ДАРСОНВАЛЬ НЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХАЯ.

КОНТАКТНАЯ МЕТОДИКА - ВОЗДЕЙСТВИЕ ТИХИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ, КОГДА ЭЛЕКТРОД НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЕТСЯ С КОЖЕЙ.

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ МЕТОДЕ ЭЛЕКТРОД НАХОДИТСЯ НА НЕБОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ ОТ КОЖИ.

ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕКТРОД

ГРИБОК

УНИВЕРСАЛЬНА,
ДЛЯ ПРОЦЕДУР
ПО ЛИЦУ И ПО ТЕЛУ

КАПЕЛЬКА

ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПРЫЩАМИ
И ЧЕРНЫМИ ТОЧКАМИ

ЛЕПЕСТОК

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА,
ОМОЛАЖИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР
И ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ

РАСЧЕСКА

ДЛЯ СИЛЬНЫХ ВОЛОС
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
КОЖИ ГОЛОВЫ



**НАПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДА ПО КОЖЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
МАССАЖНЫМ
ЛИНИЯМ**

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ТАЛЫК.

10–15
МИНУТ

GÉZATONE

BIO LIFT 4 118

ШАГ № 3

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА КОЖА
ВОСПРИИМЧИВА К ДЕЙСТВИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И
ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ "ДЕТОКС" МАСКА ДЛЯ ЛИЦА



4501712K

КУПИТЬ



АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО,
РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ.

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ

20 МИНУТ.

ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО
МАССИРУЙТЕ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.

ДНЕВНОЙ ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ «КРЕМ АКВА 24»



ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСИТЕ ДНЕВНОЙ ЛЕГКИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
МАССАЖНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

4515710K – 50 мл

КУПИТЬ



GÉZATONE

BIOLIFT4 118

ДНЕМ И НОЧЬЮ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

4515701K – 200 мл

КУПИТЬ



КОРЕЙСКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И
НИАЦИНАМИДОМ ДЛЯ ЛИЦА

4515716K - 2 мл x 10 шт

КУПИТЬ



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ



ДНЕВНОЙ ЛЕГКИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«АКВА 24»

4515710K – 50 мл

КУПИТЬ



НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С ВИТАМИНОМ Е «АКВА 24»

4515704K – 200 мл

КУПИТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД



ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ПРОТИВ МОРЩИН
ДЛЯ ОБЛАСТИ
ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ

4516135

КУПИТЬ



СС КРЕМ
«КОМФОРТ»
SPF 40

4515810K

КУПИТЬ



КАРБОКСОТЕРАПИЯ
МАСКА
ПУЗЫРЬКОВАЯ
"ДЕТОКС И СИЯНИЕ"

4516421K

КУПИТЬ

GÉZATONE



BIOLIFT4 118