

GÉZATONE



RF LIFTING 1607

ПРОГРАММА КРАСОТЫ

GÉZATONE

RF LIFTING 1607

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ



ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.



СНИМИТЕ ВСЕ УКРАШЕНИЯ, КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. ОЧИСТИТЕ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.



НАНЕСИТЕ НА ЧИСТУЮ КОЖУ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ КОНТАКТНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ



ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ, ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЯВИТСЯ НА ДИСПЛЕЕ.

1 нажатие – 1 уровень интенсивности
2 нажатия – 2 уровень интенсивности
3 нажатия – 3 уровень интенсивности
4 нажатия – режим выключается
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ С МИНИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ.



В РЕЖИМЕ LED КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ЦВЕТА.

ВО ВРЕМЯ СЕАНСА НЕОБХОДИМО КАСАТЬСЯ ПАЛЬЦАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ НА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ АППАРАТА.



ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ, ДВИГАЯСЬ АППАРАТОМ ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ КОНТАКТНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ.



ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛИТЕ ОСТАТКИ ГЕЛЯ, ПРОТРИТЕ ЛИЦО ЛОСЬОНОМ. ЗАВЕРШИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСКИ, ЗАТЕМ НАНЕСИТЕ КРЕМ / СЫВОРОТКУ.



БЫСТРЫЙ СТАРТ ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА



СВЕТОДИОДЫ

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ RF

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ EMS

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА РЕЖИМА ВИБРОМАССАЖА

КНОПКА РЕЖИМА EMS + МИКРОТОКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА РЕЖИМА RF ЛИФТИНГА

КОРПУС ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ АППАРАТНУЮ КОСМЕТИКУ



GÉZATONE

RF LIFTING 1607

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТОЙКОГО ВИДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОДНОГО СЕАНСА НЕ ДОСТАТОЧНО, НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КУРС ПРОЦЕДУР.

Курс	ОСНОВНОЙ КУРС		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС
	4 НЕДЕЛИ	2 НЕДЕЛИ	4 НЕДЕЛИ
РЕЖИМ			
RF ЛИФТИНГ + ХРОМОТЕРАПИЯ	ЕЖЕДНЕВНО 1 РАЗ В ДЕНЬ ВЕЧЕРОМ	2 РАЗА В НЕДЕЛЮ ВЕЧЕРОМ	
МИОСТИМУЛЯЦИЯ + МИКРОТОКИ	ЕЖЕДНЕВНО 1 РАЗ В ДЕНЬ УТРОМ	2 РАЗА В НЕДЕЛЮ УТРОМ	2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ВИБРОМАССАЖ	ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ		



- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО НАПРАВЛЯТЬ ПРИБОР К СЕРЕДИНЕ ГОРЛА
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПРИБОР ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГЛАЗА.
- В РЕЖИМАХ CLEAN И IMPORT ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО 1 И 2 УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ.

GÉZATONE

RF LIFTING 1607

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ

ШАГ № 1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ** СКРАБЫ, СРЕДСТВА С ВНА И АНА КИСЛОТАМИ, ЭНЗИМНЫЕ ПИЛИНГИ, ЧТОБЫ НЕ ТРАВМИРОВАТЬ КОЖУ.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»



4515701K – 200 мл

КУПИТЬ

ОЧИСТИТЕ КОЖУ ИСПОЛЬЗУЯ
УВЛАЖНЯЮЩУЮ ПЕНКУ ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ
ВЛАЖНЫМИ КОНЧИКАМИ
ПАЛЬЦЕВ, ТЩАТЕЛЬНО
СМОЙТЕ. ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ.



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С
УВЛАЖНЯЮЩИМ
ТОНИКОМ «АКВА 24»

НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ
ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ
ЛИЦА И ШЕИ. 4515702K – 200 мл

КУПИТЬ



GÉZATONE

RF LIFTING 1607

РЕЖИМ RF

RF ЛИФТИНГ + ХРОМОТЕРАПИЯ

ШАГ № 2

РЕЖИМ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ RF И КРАСНОЙ ХРОМОТЕРАПИИ ДЛЯ ВИДИМОГО ЛИФТИНГА И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ. АКТИВИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА. ОМОЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА КОЖИ.

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4501426AR – 250 мл

КУПИТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ. ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПО СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО.

НАНЕСИТЕ КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ.

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ RF

ВЫБЕРИТЕ КНОПКОЙ LED КРАСНЫЙ ЦВЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ С 1го УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ.



**ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
15 МИНУТ**

**ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЯЙТЕ ГЕЛЬ,
ЧТОБЫ КОЖА НЕ БЫЛА СУХОЙ.**



**ПОДБОРОДОК И
НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА.**

ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ НАСАДКУ К КОЖЕ ПОД ПОДБОРОДКОМ ПО ЦЕНТРУ. ВОДИТЕ УСТРОЙСТВО СЛЕВА НАПРАВО И ОБРАТНО.

ЩЕКИ.

ВОДИТЕ ПРИБОРОМ В СТОРОНУ СКУЛЫ С ДВУХ СТОРОН



**ОБЛАСТЬ ЛБА
ТОЛЬКО 1й УРОВЕНЬ
ИНТЕНСИВНОСТИ.**

ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ НАСАДКУ МЕЖДУ БРОВЯМИ ПО ЦЕНТРУ. ПРЯМЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ВОДИТЕ УСТРОЙСТВО ПО СХЕМЕ

ШЕЯ

КОРОТКИМИ ПРЯМЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ВОДИТЕ ПРИБОР ВПЕРЕД-НАЗАД.

GÉZATONE

RF LIFTING 1607

РЕЖИМ VIB ВИБРОМАССАЖ

ШАГ № 3

ПОСЛЕ СЕАНСА RF ЛИФТИНГА
**ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ СЕАНС
ВИБРОМАССАЖА**
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОФИЛАКТИКИ
ОТЕЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЭФФЕКТА ПОДТЯЖКИ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МАСЛА «АКВА 24»



4515706K – 250 мл

КУПИТЬ

**НАНЕСИТЕ НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ
МАССАЖНЫЙ КРЕМ.**

ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ КРАТКОВРЕМЕННЫМ
НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/
ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ ЕГО
ВЫКЛЮЧАЛИ.

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ВИБРОМАССАЖА
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ С
1го УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.
В ДАЛЬНЕЙШЕМ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
ВИБРОМАССАЖА ПОВТОРНО.



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ

ШАГ № 4

**ПОСЛЕ СЕАНСА RF ЛИФТИНГА И
ВИБРОМАССАЖА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
КОЖЕ ДОСТАТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ, А ТАКЖЕ УСКОРИТЬ
ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГО КОЛЛАГЕНА.**

**УСПОКАИВАЮЩАЯ АНТИКУПЕРОЗНАЯ МАСКА С ПАНТЕНОЛОМ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ**




4516404K

КУПИТЬ

АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ
УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И
ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ
И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ.

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ
МАСКУ, ЛЕГКО МАССИРУЙТЕ
ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.

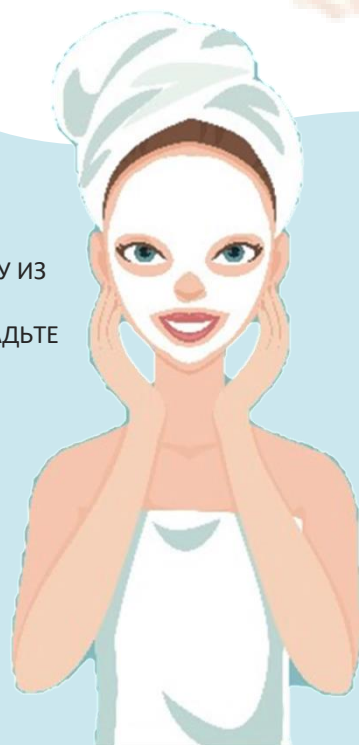

**ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ И RF
КОРРЕКЦИИ**

НАНЕСИТЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
ЛАЗЕРНОЙ И RF
КОРРЕКЦИИ
ЛЕГКИМИ
ДВИЖЕНИЯМИ.

4515501K – 130 мл

КУПИТЬ



GÉZATONE

RF LIFTING 1607

ШАГ № 5

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ



4501428AR – 250 мл

[КУПИТЬ](#)

ПОСЛЕ МИОСТИМУЛЯЦИИ
ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ВИБРОМАССАЖА
ПОВТОРИТЕ ШАГ №3

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ СМОЙТЕ ОСТАТКИ ГЕЛЯ
ЗАТЕМ ПОВТОРИТЕ ШАГ №4

РЕЖИМ EMS МИОСТИМУЛЯЦИЯ + МИКРОТОКИ

ЭТОТ ШАГ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ RF ЛИФТИНГА, УТРОМ. RF ВОЗДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРНЫЙ КАРКАС КОЖИ, А ЭМС УКРЕПЛЯЕТ МЫШЕЧНЫЙ КАРКАС ВСЕГО ЛИЦА, ДОПОЛНЯЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУР.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ. ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПО СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО.

НАНЕСИТЕ КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ.

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ EMS
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ С 1го УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ

GÉZATONE

RF LIFTING 1607

ДНЕМ И НОЧЬЮ

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

4515701K – 200 мл

КУПИТЬ



ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
"МАТРИКСИЛ"



4515967K – 50 мл

КУПИТЬ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ



ДНЕВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ «МАТРИКСИЛ»



4515960K – 50 мл

КУПИТЬ

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ «МАТРИКСИЛ»

4515962K – 50 мл

КУПИТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

ЗОЛОТЫЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПРОТИВ МОРЩИН
«МАТРИКСИЛ»



4515990K –
60 ШТУК

КУПИТЬ



СС КРЕМ
"КОМФОРТ"
SPF 40

4515810K
– 50 мл

КУПИТЬ



КРЕМ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОВАЛА ЛИЦА И
ПОДБОРОДКА "LIPOLIFT"

4501816K – 150 мл

КУПИТЬ

GÉZATONE

RF LIFTING 1607

